Praktikum 4 – Versuch 464: Spektroskopie von Sternen

Jonas Wortmann^{1*} and Angelo Brade^{1*}

1*Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn.

*Corresponding author(s). E-mail(s): s02jwort@uni-bonn.de; s72abrad@uni-bonn.de;

1 Einleitung

Sterne lassen sich anhand ihrer Spektrallinien klassifizieren. Eine prägnante Spektrallinie ist die $H-\alpha$ Linie. Ihre Breite gibt Auskunft über die Größe der Besetzungszahl der Wasserstoffatome in einem Stern. Mit dieser Information lassen sich Aussagen über die Beschaffenheit eines Sterns tätigen.

Sternwinde beschreiben die Abstoßung von Gas aus der äußersten Hülle eines Sterns aufgrund von Fusionsdruck. Für verschiedene Spektralklassen unterscheiden sich Sternwinde nicht nur in ihrer Masse und Geschwindigkeit, sondern auch durch ihre Ursache.

2 Teleskop

Das verwendete Teleskop ist vom Typ Casse-Grain, siehe Abb. (1). Mit Hilfe der Software Cartes du Ciel, können Sterne am Himmel ausgewählt werden und dann mit der Software N.I.N.A vom Teleskop angefahren werden. Mit dem Okular kann der Stern beobachtet werden und per Fernbedienung wird das Teleskop so ausgerichtet, dass der Stern genau mittig im Okular zu sehen ist.

2.1 Spektrograph

Der verwendete Spektrograph ist der DADOS-Spektrograph (2). Eine schematische Zeichnung ist in Abb. (3) zu sehen. Das eingehende Licht vom Teleskop trifft auf einen halbdurchlässigen Spalt, mit dem es sowohl in ein Okular als auch in einen Kollimator geleitet wird. Hinter dem Kollimator trifft das Licht auf ein Reflexionsgitter, bei dem es

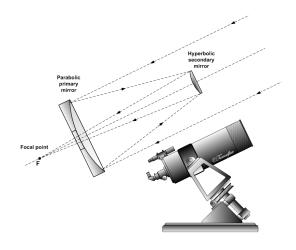


Abbildung 1 Schematische Darstellung eines CASSE-GRAIN-Teleskops.[1]

in seine Wellenlängen aufgespalten wird. Mit Hilfe einer CCD kann dieses Licht eingefangen werden und als Absorptionsspektrum ausgelesen werden.

2.2 Kalibrierung

Um ein hochwertiges Bild mit dem Teleskop aufzunehmen, müssen verschiedene Kalibrierungen durchgeführt werden.

Der dark frame gleicht das thermische Rauschen der CCD aus. Durch eine gewisse thermische Energie der Elektronen, können diese aus dem Valenzband in das Leitungsband gehoben werden und dadurch in einen Potentialtopf der CCD gelangen. Um diese gemessenen Elektronen von dem eigentlichen light frame abzuziehen, wird ein

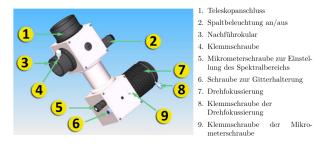


Abbildung 2 Der verwendete DADOS-Spektrograph mit Legende. [2]

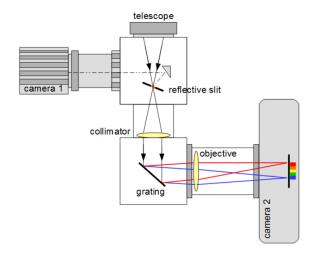


Abbildung 3 Schematische Zeichnung des DADOS-Spektrographen.[2]

Bild mit vollständig abgedunkelter CCD durchgeführt. Da dieses Rauschen im Mittel steigt, ist die Integrationszeit des dark frames gleich der Integrationszeit des light frames.

Der Kalibrierungsframe dient der Zuordnung der Wellenlänge zu den Pixeln. Mit einer Gasentladungslampe eines bekannten Gases wird ein Spektrum aufgenommen, um die Position der Emissionslinien (also den Wellenlängen) der Position der Pixel zuzuordnen.

3 Abhängigkeit der H $-\alpha$ Linie von der Spektralklasse

Sterne sind anhand ihrer Spektrallinien in verschiedene Klassen unterteilt, Abb. (4). Mit Hilfe der H- α Linie lassen sich Aussagen über die Menge an Wasserstoff in einem Stern tätigen und

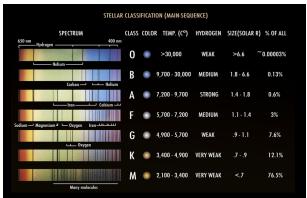


Abbildung 4 Spektralklassen der Sterne.[3]

damit auch über seine Eigenschaften und Entwicklung. In diesem Versuch wird die Besetzungszahl der Elektronen im n = 2 Niveau des Wasserstoffatoms berechnet und der Elektronendruck überprüft.

Theoretischer Hintergrund: Wasserstoff 3.1

Die H α oder die Balmer- α Linie von Wasserstoff beschreibt den Übergang eines Elektrons in Wasserstoff von n = 3 auf n = 2. Mit Hilfe der Saha-Gleichung kann die Besetzungszahl der Elektronen im n = 2 Zustand geschrieben werden

$$n_2 = \frac{8p_e \lambda_{\rm th,e}^3 e^{\chi/4k_B T}}{4k_B T + p_e \lambda_{\rm th,e}^3 Z_{\rm int,0}}$$
(1)
$$Z_{\rm int,0} \approx 2e^{\chi/2k_B T} + 8e^{\chi/4k_B T} + \dots$$
(2)

$$Z_{\text{int},0} \approx 2e^{\chi/2k_BT} + 8e^{\chi/4k_BT} + \dots$$
 (2)

Dies ist genau der Anteil an Elektronen im Wasserstoff, der die H α Linie erzeugt. Für eine detailiertere Herleitung sei auf [2] und [4] verwiesen. Die Größe $p_e = 10 \,\mathrm{Pa}$ ist der Elektronendruck, deren Wert experimentell überprüft wird.

3.2 Theoretischer Hintergrund: Spektralklassen

Ein Stern durchläuft in seiner Lebenszeit auf der Hauptreihe verschiedene Fusionsprozesse. Dabei fusioniert dieser ausgehend von Wasserstoff zu immer schwereren Atomen, wodurch das Alter eines Sterns anhand seiner Zusammensetzung gedeutet werden kann. Aufschluss auf diese Zusammensetzung bietet eine spektralanalyse des Emissionsspektrums. Da verschieden schwere Atome Licht von unterschiedlichen Wellenlängen emittieren, kann mit Hilfe eines Absorptionsspektrums (4) oder Emissionsspektrums auf die Zusammensetzung eines Sterns und damit auf das Alter oder die Temperatur geschlossen werden.

3.3 Durchführung & Auswertung: Sternspektren

Das aufgenommene Sternspektrum wird mit dem Programm nEDAR analysiert. Mit dem Kalibrierbild können Wellenlängen zu den Pixeln zugeordnet werden. Dabei wird von einem linearen Zusammenhang zwischen Wellenlänge und Pixel ausgegangen, sodass die Zuordnung über einem linearen Fit geschehen kann.

Die H α Linienbreite kann mit Hilfe eines Fits an das, mit nEDAR extrahierte, Spektrum berechnet werden. Diese Linienbreite wird dann in Abhängigkeit der Temperatur aufgetragen und mit der Besetzungszahl n_2 (T) verglichen.

Die Auswertung der Daten hat gezeigt, dass die selbst aufgenommenen Spektren nicht verwertet werden können. Grund hierfür waren die Umstände während der Messung. Die Nacht war wegen des Vollmondes nicht vollständig dunkel, daher ist das Spektrum der Sonne in die Messung eingegangen. Gegen Mitternacht zogen Wolken in großen Teilen des Himmels auf, was die Messung erschwert hat. Zudem gab es viel Lichtverschmutzung bei Sternen, die vor Allem in der Nähe des Horizonts lagen. Daher wurde sich auf die Messung von Sternen in der Nähe des Zenits in möglichst großer Entfernung von Mond und Wolken konzentriert.

3.3.1 HD32630

Der untersuchte Stern ist der B3 Klasse Stern HD32630.

3.3.2 HD56537

Der untersuchte Stern ist der A3 Klasse Stern HD56537.

3.3.3 HD77327

Der untersuchte Stern ist der A1 Klasse Stern HD77327

3.3.4 Bereitgestellt: HD109358, HD134083, HD21428, HD29488, HD60179

Da die aufgenommenen Sternspektren allein nicht für die Auswertung reichen, werden Daten von weiteren Sternen bereitgestellt.

Hieraus ergeben sich

| Stern | Äquivalenzbreite H α |
|----------|-----------------------------|
| HD109358 | |
| HD134083 | |
| HD21428 | |
| HD29488 | |
| HD60179 | |

4 Sternwinde

Sternwinde sind Massenabstoßungen in der Form von Gas aus der äußersten Hülle eines Sterns. Da diese von unterschiedlicher Masse und Geschwindigkeit sein können, beeinflussen sie die Entwicklung eines Sterns signifikant. Diese können unter anderem dazu Beitragen, dass ein O-Stern in einen WR-Stern übergeht. Das Zwischenstadium bilden die LBV-Sterne, deren Sternwindgeschwindigkeiten in diesem Versuch bestimmt werden.

4.1 Theoretischer Hintergrund: Sternwinde

Überwiegt der Strahlungsdruck dem Gravitationsdruck in der oberen Atmosphäre von Sternen, so stößt dieser seine äußere Hülle ab. Dabei sind zwei verschiedene Sternwinde zu unterscheiden.

Sterne, wie Rote Riesen oder Überriesen die nicht mehr auf der Hauptreihe sind, stoßen oft viel Masse $(\dot{M}>10^{-3}{\rm M}_{\odot}/{\rm y})$ mit langsamer Geschwindigkeit $(v=10\,{\rm km/s})$ aus. Diese Winde sind von Strahlungsdruck angetrieben.

Sterne, wie O und B Sterne, stoßen nur wenig Masse ($\dot{M} < 10^{-6} \rm M_{\odot}/\rm y$) mit großer Geschwindigkeit ($v > 1 \rm \, km/s - 2000 \, km/s$) ab. Diese großen Geschwindigkeiten kommen von Resonanzen der Strahlung des Sterns mit dem Material des Sternwindes.

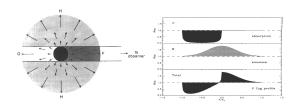


Abbildung 5 Das P Cygni Profil eines Sterns. Abzisse: v/v_{∞} .[2]

4.2 Theoretischer Hintergrund: P Cygni Profil

Betrachtet man bestimmte Emissionslinien eines Sterns, so lässt sich bei einem Stern mit vorhandenem Sternwind ein P Cygni Profil, Abb. (5), erkennen.

Innerhalb des Windes emittiert der Stern Licht. Dieses Licht wird von dem Sternwind, welcher genau in der Linie zwischen Beobachter und Stern liegt, absorbiert. Dadurch lässt sich hier eine Verringerung des Flusses feststellen. Dies erkennt man in Abb. (5) in F. Da sich der Sternwind jenseits des Sterns ausbreitet, wird dort ein größerer Fluss festgestellt, der durch die Emission des Windes selbest hervorgerufen wird. Dies erkennt man in H. Hinter dem Stern (relativ zum Beobachter) wird keine Strahlung gemessen, da diese nicht durch den Kern des Sterns zur Seite des Beobachters dringt. Fügt man F und H zusammen, so ergibt sich eine charakteristische Kurve, die bei Sternen mit Sternwinden auftritt.

Die Absorption ist keine Absorptionslinie, sondern ein Absorptionstrog, da der Sternwind verschiedene Geschwindigkeiten aufweist. Dabei hat er eine Geschwindigkeit von $-v_{\infty}$ am äußersten Rand¹ und eine Geschwindigkeit von $v \approx 0$ unmittelbar vor dem Stern. Dadurch ist dieser DOPPLER-verschoben und es bildet sich eine breite Absorptionslinie.

Das Emissionsspektrum ist Gauss-förmig von $-v_{\infty}$ bis v_{∞} da es über den ganzen Umfang des Windes verteilt ist. Der Emissionspeak ist kreisförmig um den Stern verteilt und besitzt dort – bei $v \approx 0$ – ein Maximum.

Die Endwindgeschwindigkeit des Windes kann daher mit dem DOPPLER-Effekt bestimmt werden, indem die Wellenlängendifferenz der blauen Kante des Absorptionstrogs bei $v=-v_{\infty}$ und dem Emissionspeak bei $v\approx 0$ verglichen wird. Dabei ist

$$\lambda_{\rm b} = \lambda_{\rm e} \sqrt{\frac{c - v_{\infty}}{c + v_{\infty}}},$$
 (3)

wobei $\lambda_{\rm b}$ die Wellenlänge an der blauen Kante des Absorptionstrogs und $\lambda_{\rm e}$ der Peak des Emissionsspektrums ist.

4.3 Durchführung & Auswertung: P Cygni Profil Endsternwindgeschwindigkeit

Analog zur H α Linie wird das Spektrum von P Cygni aufgenommen, mit nEDAR analysiert und ein linearer Fit zur Wellenlängenkalibrierung durchgeführt.

Um die Endwindgeschwindigkeit ν_{∞} zu bestimmen kann wie in 4.2 vorgegangen werden. Es ist

$$v_{\infty} = \frac{c \left(\lambda_{\rm e}^2 - \lambda_{\rm b}^2\right)}{\lambda_{\rm e}^2 + \lambda_{\rm b}^2}.$$
 (4)

Die Wellenlängen $\lambda_{\rm e}$ und $\lambda_{\rm b}$ werden an dem Plot des P Cygni Profils abgelesen. Dies wird für die Linien H α , NII 6482.0 Å und HeII 6678.2 Å durchgeführt. Es ergeben sich die Werte

| | ${\rm H}\alpha$ | NII | Неп |
|------------------|-----------------|-----|-----|
| $\lambda_{ m e}$ | | | |
| $\lambda_{ m b}$ | | | |
| v_{∞} | | | |

Tabelle 1 Die Endwindgeschwindigkeiten der verschiedenen Emissionslinien.

4.4 Durchführung & Auswertung: P Cygni Profil Radialgeschwindigkeit

Die Radialgeschwindigkeit des Sterns zum Beobachter kann mit ... berechnet werden

5 Fazit


Literatur

[1] Cassegrain reflector. https://en.wikipedia. org/wiki/Cassegrain_reflector. Letzter Zugriff: 2025-01-14

¹Die Bewegung ist relativ zum Beobachter, daher ist die Geschwindigkeit negativ. Die Richtung vom Beobachter weg ist

- [2] Praktikumsleitung: P464 spektroskopie von sternen. Universität Bonn (2016)
- [3] Spektralklasse. https://de.wikipedia.org/wiki/Spektralklasse. Letzter Zugriff: 2025-01-14
- [4] Ionization, Saha Equation. https://www.astro.princeton.edu/~gk/A403/ioniz.pdf.
 Letzter Zugriff: 2025-01-16

6 Appendix

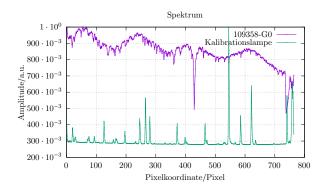

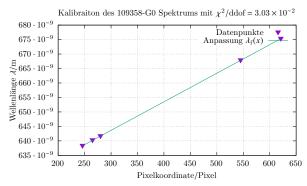
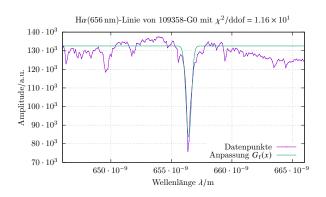


Abbildung 8

Abbildung 9

Abbildung 6



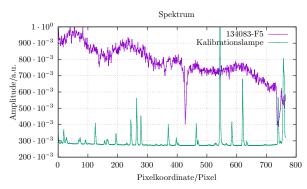
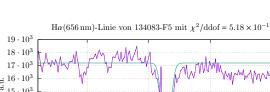


Abbildung 7



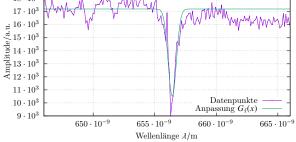
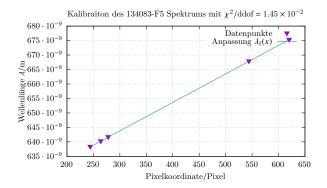


Abbildung 10



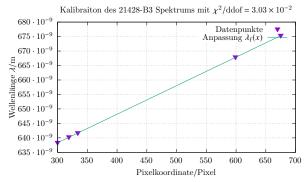
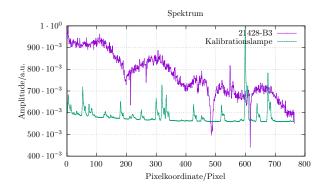


Abbildung 11

Abbildung 14



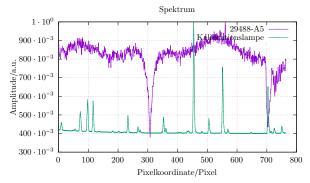
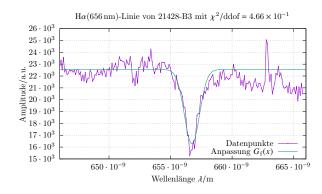


Abbildung 12

Abbildung 15



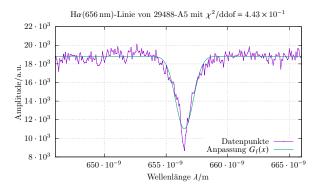
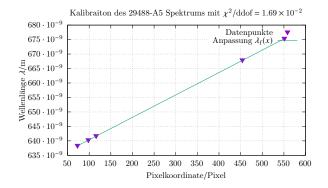


Abbildung 13

Abbildung 16



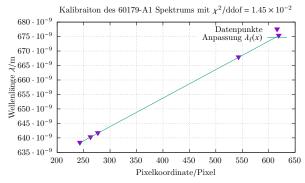
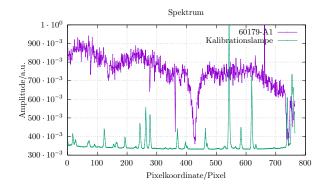


Abbildung 17

Abbildung 20



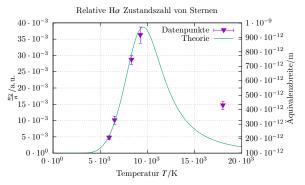
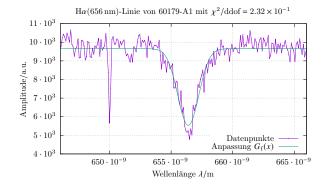


Abbildung 18

Abbildung 21 Äquivalenzbreiten



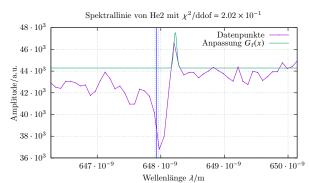


Abbildung 19

Abbildung 22

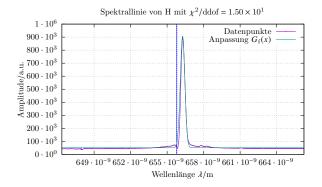
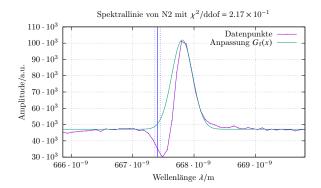


Abbildung 23



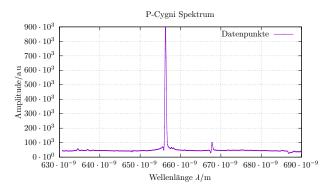


Abbildung 24

Abbildung 26

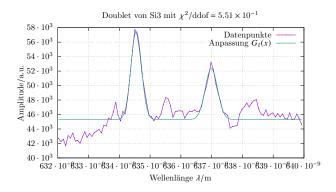


Abbildung 25